

## Schermo Facciale VH001

Schermo di protezione di occhi e viso per uso sanitario

Rev.02-04/20

### Caratteristiche



Lo schermo facciale VH001 è un dispositivo di protezione individuale che, assicura una adeguata protezione del viso e degli occhi da rischi legati a:

- spruzzi di liquidi, anche biologici
- impatti di solidi a bassa energia (particelle con velocità inferiori a 45 m/s)
- appannamento

La montatura è costituita da una banda regolabile in velcro ed è dotata di un appoggio frontale morbido intercambiabile.

Riutilizzabile dopo sanificazione secondo quanto riportato sulle istruzioni.

Sovrapponibile ad occhiali correttivi

Ampia visione periferica

### Dati Tecnici

Peso:	125 g
Materiale lente:	Policarbonato
Classe Ottica:	1
Dimensioni	Vedere disegno
Spessore schermo	1 mm

### Marcature e riferimenti normativi

Norma di riferimento:	UNI EN 166:2004
Marcatura:	OPO 1 S -EN166 3 S
Categoria di rischio:	II
Conformità	UE 2016/425

### Settori di impiego

Il DPI ottempera i requisiti di protezione previsti dal D.lgs. 81/2008 per quanto concerne la protezione da agenti biologici (titolo X). È progettato per l'utilizzo in attività lavorative che comportano il rischio di esposizione ad agenti chimici e biologici quali batteri, parassiti, funghi, virus (agenti biologici del gruppo 2 e 3 in riferimento all'Allegato XLVI del D.lgs. 81/2008).

I settori principali settori di impiego sono quelli previsti dall' Allegato XLIV del D.lgs. 81/2008 ed a solo titolo esemplificativo citiamo:


- Settore veterinario;
- Laboratori analisi o di ricerca;
- Attività nei laboratori clinici, veterinari, microbiologici e diagnostici;
- Industrie di biotecnologie ed Industria farmaceutica;
- Trattamento e smaltimento acqua, reflui, rifiuti e di raccolta di rifiuti potenzialmente infetti
- Protezione civile, attività di pronto intervento
- Attività a contatto con il pubblico/front office in situazioni di emergenza CoVid

## Schermo Facciale VH001

Schermo di protezione di occhi e viso per uso sanitario

Rev.02-04/20

### Dimensioni

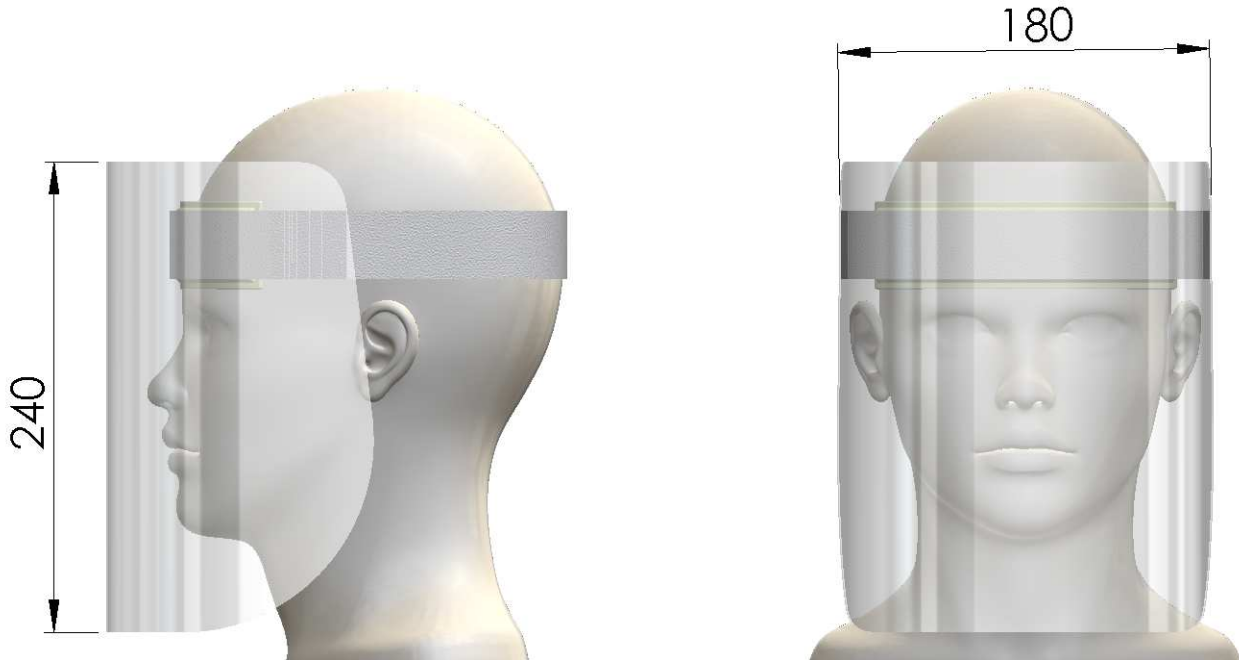

### Condizioni di fornitura

Spedizione	Scatole di cartone (nei formati da 5 pz. – 25 pz. – 50 pz.).
Confezionamento	Ogni pezzo è insacchettato in sacchetto in PE termosaldato
Personalizzazione	Il prodotto è fornibile con cinghia in vari colori.

### Garanzia e scadenza

Scadenza: 5 anni, se conservato nel loro imballo originale e come da istruzioni.

Garanzia: 2 anni

### Certificazioni

**Certificazione di Prodotto:** Lo schermo facciale VH001 è un DPI di classe II conforme al Regolamento UE 2016/425 e certificato CE da parte dell'Organismo Notificato N. 0426 (ITALCERT Srl, Via Sarca n. 336 – 20126 Milano) con certificato n. PPE216AT820

La dichiarazione di conformità CE è disponibile all'indirizzo web: [www.oposrl.it](http://www.oposrl.it)

**Certificazione di Sistema:** OPO è azienda con Sistema Gestione Qualità certificato secondo ISO 13485:2016 e ISO 9001:2015